

Гомогенизаторы лабораторные ГЛ-П

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10000



ЦЕНА

по запросу

Категории:


Оборудование для пробоподготовки

Гомогенизаторы лабораторные

Лабораторное оборудование пробоподготовки
для ветеринарных клиник

Оборудование для ветеринарных клиник

Оборудование для пробоподготовки

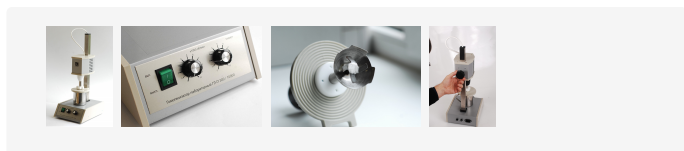

Описание

Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П 300/10000 — предназначен для получения

однородных, мелко измельчённых смесей, а также эмульсий с высокой дисперсностью в процессе пробоподготовки перед проведением лабораторных исследований. Чтобы купить гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10000 оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту. Предлагаем также ознакомиться с обзором [гомогенизаторов ГЛП](#).

Назначение

Эмульсификация смесей жиров, гомогенизация растворов и смесей жидкостей в целях получения репрезентативного образца.

Особенности

Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10 000 отвечает требованиям ГОСТов: — **ГОСТ 31976-2012**. Йогурты и продукты йогуртные. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности — **ГОСТ 33926-2016**. Продукты молочные составные и молокосодержащие. Мороженое и смеси для мороженого. Определение массовой доли жира методом Вейбулла-Бернтропа.

Рабочий орган — ротор, может быть снабжен ножом с двумя или четырьмя областями. Нож изготовлен с такой геометрией, которая обеспечивает вихреобразование и подачу материала в зону измельчения.

Наличие полипропиленовой крышки с канавками препятствует разбрызгиванию образца, и позволяет работать с емкостями различного объема.

П-образный выступ на крышке ориентирует ее относительно стойки аппарата.

Характеристики

Максимальная скорость вращения	10 000 об/мин
Мощность двигателя	400Вт
Диапазон установки таймера	10 сек — 10 мин

Рабочая емкость	нержавеющая сталь
Максимальный объем гомогенизируемого образца	до 1 л *
Электропитание	220В/50Гц
Габаритные размеры	620x285x270 мм
Масса	7,5 кг

* В базовой комплектации прибор оснащен двумя емкостями на 0.2 л. и 0.5 л. По дополнительной заявке прибор может быть укомплектован и другими емкостями до 1.0 л.

Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П 350-Pro



ЦЕНА

по запросу

Категории:


Оборудование для пробоподготовки

Гомогенизаторы лабораторные

Лабораторное оборудование пробоподготовки
для ветеринарных клиник

Оборудование для ветеринарных клиник

Оборудование для пробоподготовки

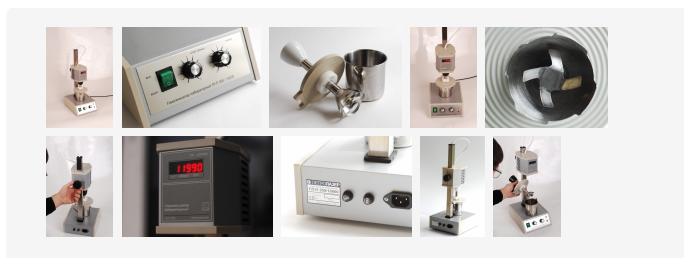

Описание

Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П 350-PRO — предназначен для получения однородных, мелко измельчённых смесей, а также эмульсий с высокой дисперсностью в процессе пробоподготовки перед проведением лабораторных исследований. Снабжен индикатором частоты вращения ротора, приводом увеличенной мощности.

Прибор соответствует требованиям многих методик по пробоподготовке, а также Приказа МЗ РФ №464н от 18 мая 2021 (Приложение №8: Стандарт оснащения микробиологической лаборатории). Чтобы купить гомогенизатор лабораторный ГЛ-П 350-PRO оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.

Назначение

Микробиология: гомогенизация образцов тканей
Химические лаборатории: получение эмульсий жиров, полимеров, получение смазок
Фармацевтика: приготовление образцов мазей и кремов, получение липосомных препаратов.

Особенности

Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-350-PRO

Имеет возможность смены рабочего органа (ножа) на четырех-лопастной.

Есть возможность связи с компьютером по разъему\кабелю RS-232. При этом, после установки простой программы, на экране отображается колонка со значениями скорости г.р.м.

Индикация скорости вращения с безконтактным оптическим датчиком позволяет улучшить воспроизводимость процесса гомогенизации, а также позволяет примерно определить стадию процесса, построить функцию изменения вязкости от времени.



Аппарат может быть оборудован плоским подогреваемым до 60 С столиком.

ГЛ-П 350-PRO отвечает требованиям ГОСТов: — **ГОСТ 33809-2016**. Мясо и мясные продукты. Определение сорбиновой и бензойной кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. — **ГОСТ 32915-2014**. Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии. — **ГОСТ 31976-2012**. Йогурты и продукты йогуртные. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности (с Поправкой). — **ГОСТ 33926-2016**. Продукты молочные составные и молокосодержащие. Мороженое и смеси для мороженого. Определение массовой доли жира методом Вейбулла-Бернтропа.

Характеристики

Максимальная скорость вращения	12000 об/мин *
Мощность двигателя	600 Вт
Диапазон установки таймера	10 сек — 10 мин
Рабочая емкость	нержавеющая сталь
Максимальный объем гомогенизируемого образца	до 1 л **
Электропитание	220В/50Гц
Габаритные размеры	220x290x555 мм

Масса	7,5 кг
--------------	--------

* По отдельному заказу — 30000 об\мин, в комплекте другой съемный рабочий орган-фреза в коронке.

** В базовой комплектации прибор оснащен тремя емкостями на 0.25 л, 0.5 л и 1.0 л. По дополнительной заявке прибор может быть укомплектован и другими емкостями до 1.0 л.

*** Модель с цифровой индикацией об\мин и портом RS-232 с марта 2023 года доступна для заказа.

Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10000 2



ЦЕНА

по запросу

Категории:


Оборудование для пробоподготовки

Гомогенизаторы лабораторные

Лабораторное оборудование пробоподготовки
для ветеринарных клиник

Оборудование для ветеринарных клиник

Оборудование для пробоподготовки

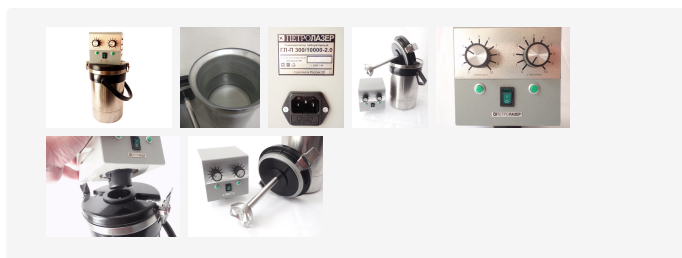

Описание

Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П 300/10000 2 — предназначен для получения однородных, мелко измельчённых смесей, а также эмульсий с высокой дисперсностью в процессе пробоподготовки перед проведением лабораторных исследований. Чтобы купить гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10000 2 оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.

Особенности

Емкость гомогенизатора герметична, способна сохранять температуру до 2-х часов.

Возможна поставка с термостабилизированной емкостью, обеспечивающей поддержание постоянной температуры пробы (гомогенизация происходит в термостате). Это позволяет добиться наилучшей воспроизводимости результатов пробоподготовки.

Характеристики

Максимальная скорость вращения	10000 об/мин
Шаг регулировки оборотов	500 об/мин
Мощность двигателя	900 Вт
Диапазон установки таймера	10 сек — 10 мин
Рабочая емкость	нержавеющая сталь
Максимальный объем гомогенизируемого образца	1800 мл
Электропитание	220В/50Гц

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	